
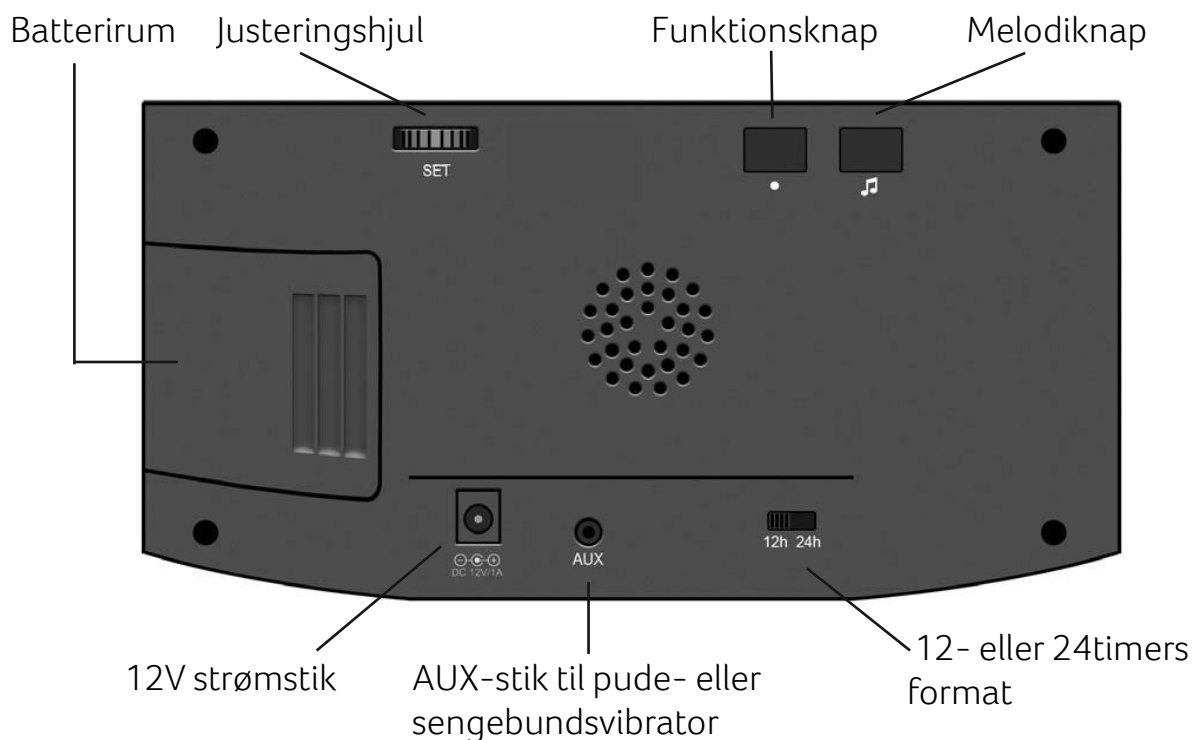


DK BRUGERVEJLEDNING
Signolux Vækkeur
A-2634

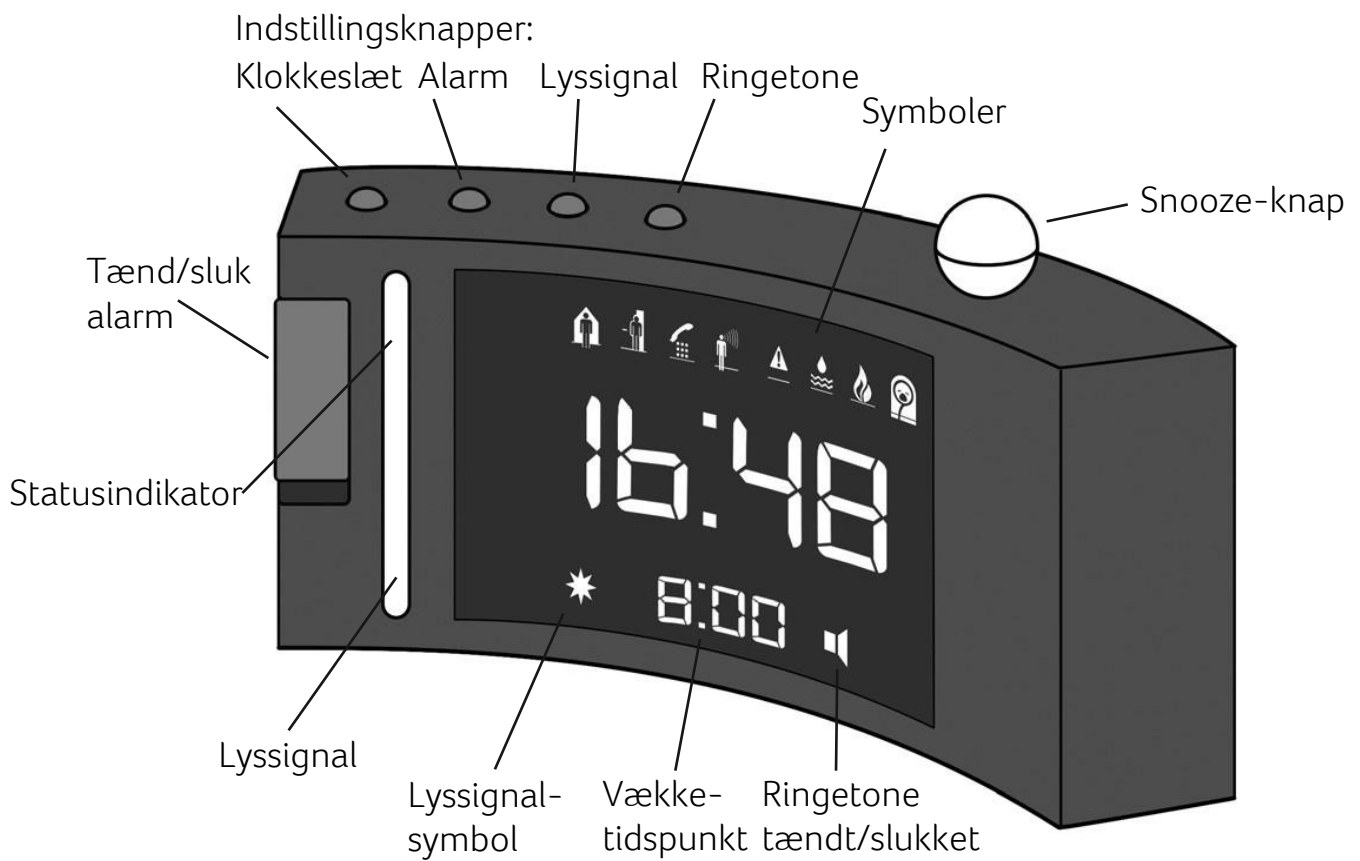

Tillykke med dit nye »Signolux« vækkeur og varslingsenhed. Husk at læse brugervejledningen grundigt. Den beskriver, hvordan enheden sættes op, og du lærer systemets muligheder at kende.

Pakkens indhold

Undersøg venligst, om de følgende dele er med i pakken:

- »Signolux« vækkeur og varslings enhed
- 12 V strømforsyning
- Denne brugervejledning
- Garantibevis

Kontakt Tonax A/S, hvis nogle af disse dele mangler.

Funktion


»Signolux« vækkeuret og varslingsenheden er et elektronisk ur med et digitalt display. Det vækker dig via en ringetone, hvis tonehøjde og lydstyrke kan justeres, blinkende lys og/eller vibration. Vækkeuret og varslingsenheden er også en Signolux-modtager, der kan modtage alarm- og ringesignaler fra de forskellige Signolux-sendere.


Et modtaget signal laves om til lyd- og lyssignaler, og displayet indikerer med symboler, hvilken alarm der er aktiveret. Det er muligt at tilslutte en pude- eller sengebundsvibrator til vækkeuret og varslingsenheden (tilbehør).


Opsætning

Tilslut strømforsyningen til 12 V strømstikket på bagsiden af vækkeuret og varslingsenheden, og sæt den i en stikkontakt med 230 V.

Indstilling af klokkeslæt

For at indstille klokkeslættet skal du trykke på indstillingsknappen for klokkeslæt »  « i ét sekund. Timetallene begynder at blinke. Indstil det ønskede timetal ved at dreje til venstre eller højre på justeringshjulet på vækkeurets bagside.

Tryk på klokkeslæt-knappen»  «. igen. Minuttallene begynder at blinke. Drej på justeringshjulet for at indstille det ønskede minuttal.

Tryk på klokkeslæt-knappen»  « igen for at afslutte, og det indstillede klokkeslæt vises.

Indstilling af alarm

For at indstille et vækketidspunkt skal du trykke på indstillingsknappen for alarmer »🔔« i ét sekund. Vækketidspunktets timetal begynder at blinke. Indstil det ønskede timetal ved at dreje til venstre eller højre på justeringshjulet.

Tryk på alarm-knappen »🔔« igen. Vækketidspunktets minuttal begynder at blinke. Drej på justeringshjulet for at indstille det ønskede minuttal. Tryk på alarm-knappen »🔔« igen for at afslutte, og det indstillede vækketidspunkt vises.

Tænd/sluk alarm

Alarmer tændes og slukkes ved hjælp af skydeknappen på venstre side.

Skydeknapp i øverste position (grønt område kan ses): Alarm er tændt.

Skydeknappen i nederste position:

Alarm er slukket.

Ringetone til/fra

Tryk på ringetone-knappen »🔊« i ét sekund for at slå ringetonen til eller fra. Hvis ringetonen er slået til, kan højttalersymbolet ses på displayet.

Indstilling af ringetonens lydstyrke

Tryk og hold ringetone-knappen »🔊« nede, mens lydstyrken justeres. Efter 2 sekunder kan ringetonen høres. Hold ringetone-knappen nede, og drej justeringshjulet til venstre eller højre for at justere ringetonens lydstyrke. Slip ringetone-knappen for at afslutte indstillingen af lydstyrken.

Indstilling af ringetonens tonehøjde

Under justering af vækketonens tonehøjde skal vækketone-knappen »🔊« og den kugleformede Snooze-knap trykkes og holdes nede samtidig.

Efter 2 sekunder kan ringetonen høres. Hold ringetone-knappen og snooze-knappen nede, og drej justeringshjulet til venstre eller højre for at justere ringetonens tonehøjde. Slip knapperne for at afslutte indstillingen.

Lyssignal til/fra

Tryk og hold lyssignal-knappen »🌟« nede i ét sekund for at slå lyssignalet til eller fra. Hvis lyssignalet er slået til, kan lyssignal-symbolet ses på displayet.

Indstilling af lysstyrken i displayet om natten

Lysstyrken i displayet justeres automatisk i forhold til lysforholdene i rummet. I dagtimerne vises tallene med fuld lysstyrke. I mørke justeres displayets lysstyrke. Du kan dog selv indstille denne.

Tryk og hold lyssignal-knappen »*« nede for at indstille nattedisplayets lysstyrke. Hold lyssignal-knappen nede, og drej justeringshjulet til venstre eller højre for at justere lysstyrken i displayet om natten. Slip knapperne for at afslutte indstillingen. Foretages denne justering i dagtimerne, skifter displayet tilbage til fuld lysstyrke efter nogle få sekunder.

Snooze-funktion

Du kan Snooze alarmen ved at trykke på den kugleformede Snooze-knap. Vækkeuret ringer igen efter 5 minutter.

12- eller 24-timers format

Klokkeslættet kan vises i et 12- eller 24-timers format. Indstillingen foretages med »12- eller 24-timers format«knappen på bagsiden af vækkeuret.

Batteribackup ved strømafbrydelse

Batterirummet har plads til 4 stk. AAA-batterier (tilbehør). I tilfælde af en strømafbrydelse garanterer disse, at det indstillede klokkeslæt og modtagelsen af Signolux-signaler ikke går tabt.

Bemærk: Under en strømafbrydelse er visning af tid og lyssignalet ikke aktivt, da strømforbruget er for højt til backup-batterierne!

Indstillinger

Indstilling af signal og valg af symbol:

Der kan benyttes op til 8 sendere (fx et dørtryk) for hvert symbol.

Vær opmærksom på, at en sender kun kan tildeles, hvis den endnu ikke er kendt i Signolux-modtagerens hukommelse.

Du skal om nødvendigt først slette senderen fra hukommelsen.

1. Tryk og hold funktionsknappen »•« nede i noget tid. Symbolerne blinker i rækkefølge. Slip knappen så snart, det ønskede symbol lyser.
2. Udløs nu signalet, du ønsker at tildele det oplyste symbol ved hjælp af senderen (tryk fx på dørtrykket). c) Vent ca. 20 sekunder og test funktionen.

Slet sender fra modtagerens hukommelse

Gør følgende, hvis du ønsker at slette en sender fra hukommelsen:

1. Tryk og hold funktionsknappen »•« nede i noget tid. Symbolerne blinker i rækkefølge. Slip knappen så snart, det ønskede symbol lyser.
2. Tryk nu samtidigt på funktions- knappen »•« og melodiknappen »♪« til alle symboler lyser kort.

Bemærk, at dette sletter alle tildelte sendere fra det valgte symbol.

Indstilling af melodi

Du kan indstille melodien for hvert symbol:

1. Udløs først et signal (tryk fx på dørtrykket).
2. Symbolet, der er tildelt senderen, bør lyse, og den tidligere valgte melodi bør kunne høres.
3. Tryk og hold melodiknappen »♪« nede i to sekunder. Slip knap pen, og tryk på den gentagende gange, indtil du har fundet den ønskede melodi (du kan vælge mellem 15 forskellige lyde).
4. Når symbolet stopper med at blinke, er den valgte melodi blevet tildelt.

Symbolernes betydning

Hvert symbol er forbundet med en sender (fx dørtrykket) og kan indstilles efter ønske. Symbolerne står for:

	Dørklokke 1	grønt lys
	Dørklokke 2	grønt lys
	Telefon	orange lys
	Personkald	gult lys
	Babyalarm	hvidt lys
	Brandalarm	rødt lys
	Oversvømmelsesalarm	blåt lys
	Alarm	rødt lys

Batteristatusindikator for senderne:

Statusindikatoren på vækkeuret og varslingsenheden indikerer batteristatus for **Signolux**-senderne. Den røde statusindikator sidder i lyssignalets øverste fjerdedel. Et lavt batteriniveau for senderen indikeres ved, at den røde lampe lyser samtidigt med symbolet for den pågældende sender, når dens signal udløses. Udskift batterierne i den pågældende sender hurtigst muligt.

Kend forskel på signalerne

Dørklokke 1	<p>20 Sek</p> <p>10 Sek</p> <p>1 Sek 1 Sek</p>
Lyssignal	The recorded sound is played back once
Vibration*	<p>1 1.5 1.5 1.5 4.0 gentak til fra</p>
Dørklokke 2	
Lyssignal	The recorded sound is played back once
Vibration*	<p>1 2.0 2.0 2.0 4.0 gentak til fra</p>
Telefon	
Lyssignal	Each ringing of the telephone should trigger one telephone sound (sound at the acoustic receiver is played back once).
Vibration*	<p>1 1.5 3.0 gentak til fra</p>
Personkald	
Lyssignal	The recorded sound should be played for 5 seconds.
Vibration*	<p>1 1 1 gentak til fra</p>
Alarm	
Lyssignal	The recorded sound should be played for 14 seconds.
Vibration*	<p>1 3.5 4 gentak til fra</p>
Oversvømmelsesalarm	
Lyssignal	The recorded sound should be played for 20 seconds.
Vibration*	<p>1 1 2.0 1 2.0 gentak til fra</p>
Brandalarm	
Lyssignal	The recorded sound should be played for 20 seconds.
Vibration*	<p>1 1 2.0 1 1 1 gentak til fra</p>
Babyalarm	
Lyssignal	The recorded sound should be played for 20 seconds.
vibration*	<p>1 2.0 2.0 1.5 1.5 1.5 gentak til fra</p>

Rækkevidde

Rækkevidden mellem vækkeuret og varslingsenheden og Signolux-senderne er op til 200 meter under ideelle forhold. Følgende forhold kan reducere rækkevidde:

- Bygninger eller planter.
- Interferens fra fjernsyn, computerskærme og mobiltelefoner. Under visse omstændigheder kan dette forhindre modtageren i helt at fungere.
- Placering af senderen eller modtageren i en ufordelagtig afstand fra overflader, der reflekterer radiobølger fx gulve og vægge. Dette kan medføre, at signalbølgen svækkes eller bliver helt annulleret af den reflekterede bølge.
- Metalgenstande.
- Især i byer kan der være mange kilder til radiobølger, som kan afbryde det originale signal.
- Enheder i nærheden kørende på tilsvarende frekvenser kan også føre til interferens.
-

Vedligeholdelse

»Signolux« vækkeuret og varslingsenheden kræver ingen vedligeholdelse. Hvis enheden bliver beskidt, kan den tørres af med en blød og fugtig klud. Brug aldrig sprit, fortyndere eller andre organiske opløsningsmidler.

Enheden må ikke eksponeres for direkte sollys.

Desuden skal den beskyttes mod høj varme, fugt og voldsomme mekaniske rystelser.

Bemærk: Dette produkt er ikke beskyttet mod vandstænk. Anbring ikke beholdere med vand fx vaser, eller åben ild som fx stearinlys på eller i nærheden af produktet.

Miljøinformation

Elektrisk og elektronisk udstyr (EEE) indeholder materialer, komponenter og stoffer, der kan være farlige og skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis affaldet af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) ikke bortskaffes korrekt.

Produkter, der er mærket med en overkrydsede skraldespand, er elektrisk og elektronisk udstyr. Den overkrydsede skraldespand symboliserer, at affald af elektrisk og elektronisk udstyr ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Ved udviklingen og fremstillingen af produktet er der anvendt materialer og komponenter af høj kvalitet, som kan



genanvendes. Ved bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal fås hos de lokale myndigheder.

Batterier indeholder stoffer, der kan være skadelige for menneskers sundhed og for miljøet, hvis de ikke håndteres korrekt. Batterier er mærket med viste overkrydsede skraldespand. Den symboliserer, at udtjente batterier ikke må bortskaffes sammen med usorteret husholdningsaffald, men skal indsamles særskilt. Nogle batterier er også mærket med den kemiske betegnelse Hg (kviksølv), Cd (cadmium) eller Pb (bly). Dette er særligt skadelige stoffer, og det er derfor vigtigt, at disse batterier bliver indsamlet.

Det er vigtigt, at du afleverer dine udtjente batterier til de indsamlingsordninger, der er etableret. På denne måde er du med til at sikre, at batterierne genanvendes i overensstemmelse med lovgivningen og ikke unødigt belaster miljøet. Ved bortskaffelse af udtjente batterier skal du derfor benytte en indsamlingsordning etableret til formålet hvad enten det afleveres på dit lokale indsamlingssted eller genbrugsstation eller hentes direkte fra husholdningen. Nærmere information skal indhentes hos de lokale myndigheder.

Tekniske specifikationer

Strømforsyning: 230 V, 50 Hz; 12 V

jævnstrøm 1000

mA

Strømforbrug: Ca. 2 W

Højde: 103 mm

Bredde: 212 mm

Dybde: 70 mm

Vægt: 337 g

Dette produkt lever op til kravene i følgende EU direktiver:



- 2011 / 65 / EF RoHS-direktivet

- 2002 / 96 / EF WEEE-direktivet

Die Konformität mit den o. a. Richtlinien wird durch das CE-Zeichen auf dem Gerät bestätigt. CE Konformitätserklärungen stehen im Internet unter www.humantechnik.com im Bereich „Service“ zur Verfügung.

Tekniske specifikationer kan ændres uden varsel.