

Audinor DUO system 3.0

MANUAL

DK_20210829_01



Mikrofon
til samtalepartner



Modtager
til dig

Opladning

Ladeledningen (charge) kobles til strømforsyningen som sættes i stikkontakten i væggen. Enheden placeres vandret på et bord eller lign. og ladeledningen tilkobles ladekontakten på enheden ved hjælp af et af de to magnetiske stik. Enhedens lampe lyser rødt når den lades op, og grønt når den er fuldt opladet. Systemet kan lades op i enten tændt eller slukket tilstand. Det gør, at blandt andet synshæmmede kan betjene systemet ved at lade enhederne være tændt hele tiden, og tilkoble opladeren når man ikke bruger dem.

Tænd/sluk

- Tænd: Tryk og hold tænd/sluk knappen inde til den grønne lampen slukker. Det tager ca. 1 sekund.
- Sluk: Tryk og hold tænd/sluk knappen inde til den røde lampen slukker. Det tager ca. 1 sekund.

Lytte

Når man skal bruge halsslyngen, sættes høreapparaterne i teleslynge programmet (MT/T).

Alternativt kan man bruge et par almindelige hovedtelefoner. Audinor har specielt tilpassede hovedtelefoner med god taletydighed og kort ledning, som passer til systemet. Når man bestiller et DUO system med hovedtelefoner, følger der også en halssnor med til modtageren.

Regulering af lydstyrke på modtager

Tryk på knappen med + symbol for at skrue op for lyden.

Tryk på knappen med – symbol for at skrue ned for lyden.

Man hører et lille bip hver gang volumen ændres. Man skal trykke gentagne gange på knappen for at lave større ændringer. Når lydstyrken når minimum eller maksimum niveau, kan man se en serie hurtige røde blink.

Tilkobling af ekstern lydkilde

Man kan tilkoble en ekstern lydkilde til både mikrofon (TV mm) og modtager (iPad, mobiltelefon mm). Brug det medfølgende audiokabel (media) med magnetisk stik.


Det kan nogle gange være lidt besværligt for borger selv at tilkoble systemet til TV, idet der ikke er en standard lydudgang blandt de forskellige TV-modeller og mærker. Kontakt evt. Audinor for assistance.

Man kan bruge systemet til Skype, Zoom eller tilsvarende programmer når man bruger en iPad eller computer. Sæt audiokablet i iPad'ens hovedtelefon-jack, og forbind den til Audinor modtageren vha. magnetstikket. Man taler ind i iPad'ens mikrofon, og hører klart og tydeligt i begge høreapparater.

Brugt på samme måde, kan man tilkoble systemet til mobiltelefon. Sæt audiokablet til telefonens hovedtelefon-jack og forbind den til Audinor modtageren vha. magnetsikket. Man taler ind i telefonens mikrofon som man plejer. Hvis borger har en nyere iPhone eller en anden smartphone uden hovedtelefon-udgang (jack), vil der findes en adapter/overgangsledning som passer. Kontakt evt. Audinor for nærmere information.

Mere kaffe?

Ved at vippe modtageren til vandret position, kan man høre via modtagerens mikrofon. Funktionen benyttes når man ønsker at høre en taler tæt på, f.eks. når mikrofonen er tilkoblet fjernsynet. Lampen lyser hvidt når funktionen er aktiv. Når modtageren slippes igen, genetableres den almindelige modtager funktion.

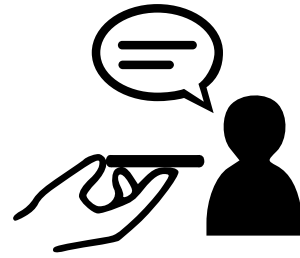

Funktionen er som udgangspunkt ikke aktiv ved ibrugtagning af det nye DUO-system. Første gang aktivering: Løft modtager op vandret, og hold "lydstyrke op" knappen ind i 5 sekunder, indtil den hvide lampe blinker. Man kan deaktivere funktionen igen ved holde enheden vandret, og skrue helt ned for lydstyrken, til den røde lampen blinker.

Mute/Dæmpning af bordmikrofon

Vend mikrofonen med forsiden ned mod bordet for midlertidigt at mute den. Når den vendes tilbage, kan man høre lyden igen.

Mikrofonen kan også mutes ved at trykke på den nedre funktionsknap "mute". På den måde kan mikrofonen også mutes når den eksempelvis bæres rundt om halsen.

Batteristatus

Med et kort tryk på tænd/sluk knappen på enten modtager eller mikrofon vil batteristatus blive fortalt, f.eks. "Mikrofon batteri 80 procent", med tydelig dansk tale.

- Mikrofonens batteristatus introduceres med "Mikrofon batteri"
- Modtagerens batteristatus introduceres med "Batteri".

Parring

Enhederne er færdig parret ved levering. For at parre en modtager til en ny mikrofon, trykkes "lydstyrke op"-knappen på modtageren inde i 3 sek. Du vil se et blått blink og høre en dobbel-tone via halsslyngen som bekræftelse.

Systemet har i udgangspunktet en "universal"-kodenøgle, som er åbent tilgængelig for andre Audinor enheder. Hvis man ønsker at skabe et lukket/aflytningssikkert system, skal der først skabes en unik kodenøgle i mikrofonen:

- Sluk for mikrofonen og tænd for den igen. Indenfor de første 30 sekunder, holdes parringsknappen i mikrofonen inde i 6 sekunder, indtil du ser et blått blink.
- Par herefter modtager til den nye kodenøgle ved at holde parringsknappen (lydstyrke +) inde i 6 sekunder. Du vil se et blått blink og høre en dobbel-tone som bekræftelse.

Tekniske data:

Vægt: 47g

Mål: 90 x 45 x 12mm

Feltstyrke: +12dB re. 400MA/m, IEC118-4

Batteri: Genopladeligt Lithium Polymer 3,7V, 700mAh

Ladetid: Mindre end 2 timer

Drifttid: Op til 14 timer

Radio: 2.4GHz, 1Mbps data rate, dynamisk frekvenshåndtering

Radio: RED 2014/53/EU, ETSI 300 328 v.2.2.2:2019

Rækkevidde: Typisk 15m (indendørs 10-20m afhængigt af lokalet).

HMI-nummer: 128323

Kontakt:

Audinor ApS, Benediktevej 5, DK-3480 Fredensborg

Mail: info@audinor.dk Telefon: (+45) 42180685