

## Produktinformation

# TV-A (tv-adapter)

### Et fuldt integreret system

TV-A tilsluttes direkte til brugerens høreapparater for nem og ubesværet brug.

### Brugervenlig

Tv-adapteren er udviklet med brugere af høreapparater i tankerne og er grundigt afprøvet for at sikre, at anvendelsen er så nem som mulig.

### Dolby® Digital og Digital Stereo

Tv-adapteren understøtter digital lyd i to gængse formater: Digital Stereo (PCM) og Dolby® Digital\*. Dette giver brugere flere muligheder for at kunne høre streamet lyd fra deres tv.

### MultiConnect

TV-A kan tilsluttes et ubegrænset antal høreapparater samtidigt, så flere brugere kan dele den samme oplevelse.

### Nem parring

Når høreapparaterne er i parringstilstand og inden for 30 cm af tv-adapteren, foretager tv-adapteren en automatisk parring og opretter en forbindelse.


### Mere information

Læs mere om TV-A på [www.bernafon.dk/products/accessories](http://www.bernafon.dk/products/accessories).



### TV-A

TV-A er en tv-adapter, der giver brugere af Bernafon høreapparater mulighed for at få stereolyd fra tv, radio eller andre lydtilkilder streamet direkte til deres høreapparater ved deres foretrukne lydniveau. TV-A understøtter en række tilslutninger, heriblandt Digital Stereo og Dolby® Digital\* via optisk TOSLINK.

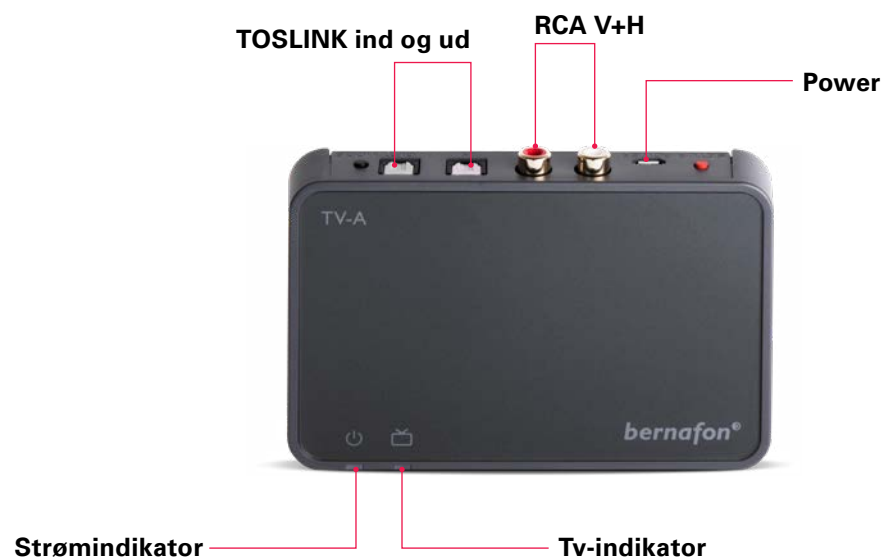

### Medfølger

- Brugervejledning
- Strømforsyning
- TV-A - sort
- TOSLINK optisk kabel 2 meter
- RCA til RCA-stereokabel
- Minijack 3,5 mm til RCA-konverter

\* Dolby er et registreret varemærke tilhørende Dolby Laboratories.

## Tekniske data

<b>TV-A</b>	
Modelnavn	TVA3
GTIN	05714464006762
<b>Brugsbetingelser</b>	
Driftsforhold	Temperatur: +5 °C til +40 °C Fugtighed: 15 % til 93 %, relativ fugtighed, ikke kondenserende Atmosfærisk tryk: 700 hPa til 1060 hPa
Opbevarings- og transportforhold	Temperatur og luftfugtighed må ikke overstige de nedenfor anførte grænseværdier i længere perioder i forbindelse med transport og opbevaring: Temperatur: -25 °C til +70 °C Fugtighed: 15 % til 93 %, relativ fugtighed, ikke-kondenserende Atmosfærisk tryk: 700 hPa til 1060 hPa
Dimensioner	124 x 80 x 21 mm; vægt 107 g
Systemfunktioner	Autoparring: TV-A vil automatisk parres til høreapparaterne, når den er i parringstilstand AutoStream: TV-A vil automatisk begynde at streame lyd, når et gyldigt lydssignal registreres MultiConnect: TV-A kan tilsluttes til et ubegrænset antal høreapparater
Kompatibilitet	TV-A kan bruges med alle Bernafon høreapparater med 2,4 GHz radioteknologi
Indgangsstik/-format	Minijack 3,5 mm (V+H) (ved brug af det medfølgende kabel og konverter) RCA (V+H) TOSLINK Digital Stereo (PCM)/Dolby® Digital
Udgang	TOSLINK (buffer-udgang fra TOSLINK-indgang)
Rækkevidde	Op til 15 meter (frit udsyn fra tv-adapter til høreapparater)
Audio-indgang (format)	Stereo analogt input (RCA) Stereo/PCM (TOSLINK) Dolby® Digital (TOSLINK)
Latenstid (TV-A-indgang til høreapparatet)	Analog: 25 ms Digital: 28 ms Dolby® Digital: 45 ms
Line-indgang, følsomhed	6 dB Vrms (analog), impedans: 10 KΩ
Audiobåndbredde	10 KHz/stereo fra input til høreapparater
Dynamisk selvjustering	AGC (analog input) (linje ind approksimation til 0 dB 5 sek.)
Statusindikatorer	Power- og status-LED på fronten
Farve	Mørkegrå
Strømforbrug	Inaktiv, streamer ikke lyd: 0,8 W Streamer lyd: 1,5 W
<b>Transceiver</b>	
Frekvens	2,402 GHz - 2,480 GHz (ISM-bånd)
Antal kanaler	39
Udgangseffekt	Max 17,1 dBm EIRP. I overensstemmelse med alle relevante standarder.
Kanalbåndbredde	1 MHz/2 MHz
Modulationstype	GFSK/2GFSK
ITU-designator	F7E



### Fabrikant

**SBO Hearing A/S**  
Kongebakken 9  
DK-2765 Smørum  
Danmark

### Hovedkvarter

**Bernafon AG**  
Morgenstrasse 131  
3018 Bern  
Schweiz  
Tlf. +41 31 998 15 15  
info@bernafon.com  
www.bernafon.com